


BESKRIVNING AV LADDAREN

KOMMA IGÅNG

LADDNINGS- INDIKATORER

Din nya WIDEX mRIC-laddare laddar dina WIDEX **MOMENT™** mRIC-hörapparater (MRR2D).

Laddaren har en laddningsfördjupning för varje hörapparat och två ljusindikatorer som visar hörapparaternas laddningsstatus.

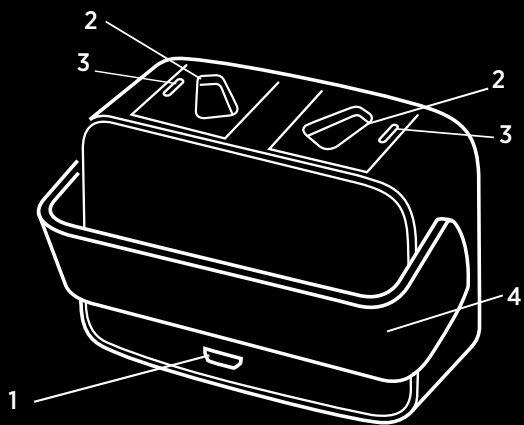

1. Micro USB-port

3. Ljusindikatorer


2. Laddningsfördjupningar

4. Skyddshölje


1. Ta tag i skyddshöljet på båda sidor och lyft det uppåt.




2. Dra det sedan mot sidan med USB-porten.

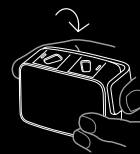

3. Anslut kabeln till laddaren via Micro USB-porten.

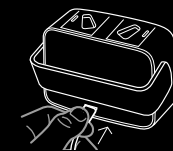


4. När laddaren är ansluten till strömförsörjningen blinkar ljusindikatorerna med vitt ljus fem gånger.

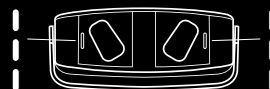

5. Laddaren är nu klar att användas.


När hörapparaterna placeras i laddaren lyser ljusindikatorn med ett fast gult ljus medan den söker kontakt med hörapparaten:

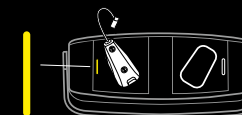

När laddaren har fått kontakt med hörapparaten kommer laddningen att påbörjas. Ljusindikatorn blinkar med grönt ljus för att indikera att hörapparaten har låg batterinivå och har mindre än 40 % laddning:



Ljusindikatorn lyser med pulserande grönt ljus för att indikera att hörapparaten har mer än 40 % laddning:

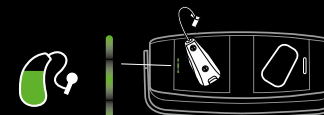


Ljusindikatorn lyser med ett fast grönt ljus för att indikera att hörapparaten har 100 % laddning:



ÖVERSIKT ÖVER LJUS- INDIKATORER


Blinkande vitt ljus 	Laddaren är ansluten till strömförsörjningen.
Fast gult ljus 	Laddaren letar efter hörapparaten.
Blinkande grönt ljus 	Hörapparaten laddas, mindre än 40 % batterinivå.
Pulserande grönt ljus 	Hörapparaten laddas, mer än 40 % batterinivå.
Fast grönt ljus 	Hörapparaten är fulladdad, 100 % batterinivå.

En indikator blinkar rött 	Ett fel har inträffat under laddning och laddningen har stoppats.
Båda indikatorerna blinkar rött 	Ett fel har inträffat under laddning och laddningen har stoppats för båda hörapparaterna.
Blinkande gult ljus 	Hörapparaternas temperatur har blivit för hög under laddning och laddningen har pausats.

Mer information finns i bruksanvisningen som du fick med din Widex mRIC-laddare. Du kan även titta på handledningen om hur du använder laddaren i WIDEX-MOMENT™-appen.



Tryckt 2020-01. 9 502 5404 012 #01
Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ och DEX är varumärken som tillhör Widex A/S.

 WIDEX A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



WIDEX mRIC -LADDARE SNABBGUIDE

WIDEX MOMENT™
THIS SOUND CHANGES EVERYTHING

